

SYNCA

サーク グレイス

CirC GRACE

マッサージチェア L24 MR385

カラダもココロもよろこぶ、
私のご褒美タイム。



FUJIIRYŌKI

自宅でいつでも極上の リラックスタイムに浸れるしあわせ。

なにかとストレスや疲れが溜まりがちな現代人にとって、心と体の調和をすばやく取り戻すことが、充実した毎日をつくる秘訣です。機能もデザインも進化したCirC GRACEがもたらす心地よいリラクゼーションが、日常の負担をやわらげ、自分らしく生きるチカラを引き出します。



ゆったりくつろげるリクライニングチェアモード
マッサージを行わずに、ヒーター、Bluetooth®スピーカー、リクライニング機能が使えるモードです。

MECHANICAL MASSAGE

ゆったり、包み込むようなソファ形状。首からお尻までを流れるようにマッサージするGRACEメカとフレームでスムーズに身体をほぐします。

GRACEメカ もみ速度調節4段階


多彩なもみ技を搭載した4つ玉メカユニットで広範囲をほぐします。

ソフトもみ玉

弾力のある素材のもみ玉で心地よくもみほぐします。

肩位置自動検知機能

一人ひとりの体形に合わせて肩位置を自動検知します。

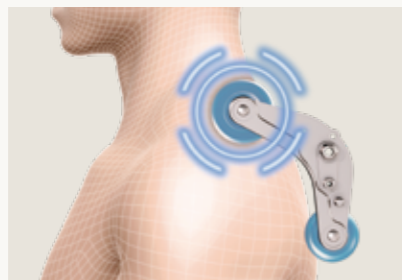

GRACEフレーム

首からお尻まで約95cmのワイドな施療範囲でマッサージします。



8タイプのもみ技

お好みで手技のようなもみ技を8タイプから選択できます。

		もみ	リズムもみ
押しもみ	リズムさざなみ	たたき	リズムたたき
大きくもみ広げ、小さくもみ込むようにコリをほぐします。	もみながらたく、緩急のある心地よいマッサージで広範囲をほぐします。	さざなみ	指圧*

*指圧は、もみ動作を応用した表現です。

ゼロフロートリクライニング

水に浮かんでいるようなリラックスした姿勢でマッサージが受けられます。



AIR MASSAGE + HEATER

エアバッグでふくらはぎを圧迫してスッキリケア。腰横は左右から挟むようにほぐしたり、ひねるような動作でマッサージします。

エアバッグ8個

エア強さ調節4段階

グラフェンヒーター

腰周辺に搭載した熱伝導率が高いヒーターで素早く温めます。

ヒーター温度
約38~45℃

※室温20℃~25℃の場合。室温等により体感温度が異なる場合があります。



NEW スマートフォンポケット & 充電ポート

スマートフォンが入る便利なポケット付きで、マッサージしながら充電できます。



※Type-A×1個(定格出力:DC5V 2A)

Bluetooth® スピーカー搭載 5つの内蔵音楽

スマホやタブレットと接続し、贅沢な音響空間を楽しめます。



※内蔵の音楽とマッサージは連動しません。

反転式フットレスト

簡単に脚部を反転させてフットレストに。



スマートフォンポケット



アンビエントLEDライト




調節ダイヤル



キルティングデザイン

リモコン (操作パネル)

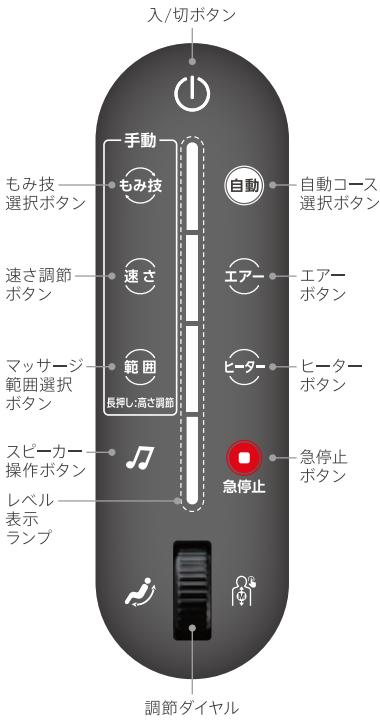

8種類の自動コース

新たに3つの新コースを搭載。全身から部位のケアまで幅広く対応。

- **自動** 全身リズムカル **NEW**
- **自動** 全身疲労回復
- **自動** 全身ゆったり **NEW**
- **自動** 全身ストレッチ
- **自動** 首肩中心
- **自動** 腰中心
- **自動** 骨盤中心
- **自動** エア **NEW**

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および番号は、それぞれの所有者に帰属します。

SYNCA CirC GRACE マッサージチェア L24 MR385

メーカー希望小売価格：オープン価格

SYNCA公式サイト
www.synca-wellness.jp



【商品仕様】

- 本体寸法:
リクライニングしていないとき
幅 約70×奥行 約110×高さ 約105cm
リクライニングしたとき
幅 約70×奥行 約145×高さ 約78cm
- 本体寸法 (開梱時): 幅 約70×奥行 約113×高さ 約78cm
- 梱装箱寸法: 幅 約70×奥行 約145×高さ 約83cm
- リクライニング角度: 約130°~約158度
- 質量: 約60kg ● 電源: AC100V (50/60Hz)
- 消費電力: 80W (電熱器消費電力: 6W) (待機電力: 2W)
- 定格時間: 20分 (オートタイマー約15分)
- 医療機器認証番号: 306AHBZX00011000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

- 電気代の目安: 約37円/月 (ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- 電気代の目安: 約34円/月 (マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※ 電料料金目安単価: 31円/kWh (税込) で算出。(当社調べ)

付属: 調節パッド




ベージュ×ベージュ (CC)

JANコード: 4951704173704



ブラック (BK)

JANコード: 4951704173698

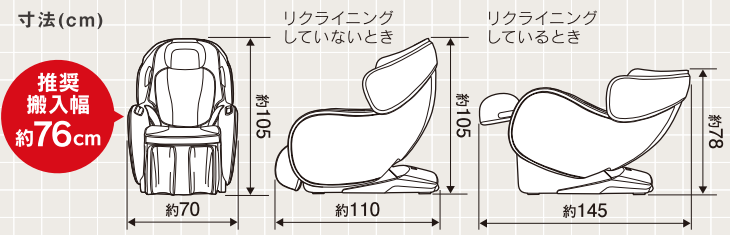

推奨搬入幅: 本体幅 約70cm + 養生幅 約6cm

“SYNCA”はフジ医療器が新たに展開するパーソナルケアブランドです。

SYNCAは、1954年創業マッサージチェア業界のパイオニアとしてフジ医療器が長年培ってきたこだわりのマッサージ技術とリラックス性の高いアイデアを詰め込んだ商品をお届けします。



ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。● 医師からマッサージを禁じられている人 (例: 血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈硬化 (瘤)、急性静脈 (りゅう (瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など) ■ 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう (腫瘍) のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温 38℃以上 (有熱期) の人 (例: 急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき。) ● 骨粗しょう (鬆) 症の人、せきつい (脊椎) の骨折、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人 ● 背骨 (脊椎) に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● 腱鞘炎の人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■ お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!

ソムリエコール ☎ 0120-113-706
受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年4月現在のものです。

25.4.3M.BQ.BE.A 注文No.1775