



SYNCA

FOOTMASSAGER FM220

フットマッサージャー

SYNCA

広く、強く、もみほぐす

多彩な動きで、ふくらはぎから足裏までを一気にマッサージ。
頑張った一日の疲れを解きほぐす、あなただけのリラックスタイムを。

FOOTMASSAGER FM220

ふくらはぎ

低反発性の突起付きモミボードが、ふくらはぎ全体をはさみ、うねるように揉みほぐします。点と面のパワフルな刺激で、たまった疲れを一気にケアします。



脚の出し入れが簡単な「背面フリー」構造

背面の開口部が広く、脚の出し入れはスッと差し込むだけ。お好みに合わせてマッサージの位置も簡単に調節できます。



エアバッグ

足先～甲、側面、足首の3か所にエアバッグを搭載。細かく動きながら、足全体をしっかり包み込み、ギュッと掴むようにマッサージします。

足先
～甲

側面

足首




足裏ローラー

足先、土踏まず、かかとをマッサージする3軸の大型ローラーと複数の突起が連動して足裏をくまなく刺激します。足を押さえるように圧迫するエアバッグとの連動で、より深い体感を得られます。

足先

土踏まず

かかと

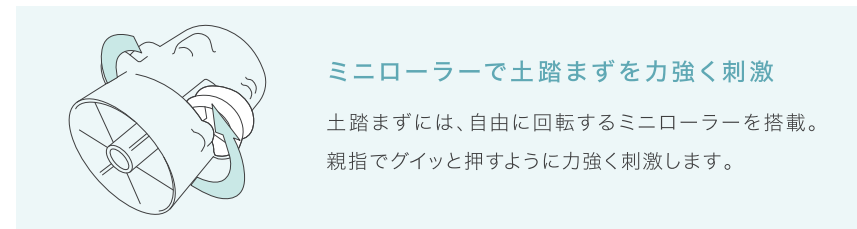

10分で脚全体を効率的にケア



2種類の「自動コース」と3段階の「エアーマッサージ強弱調節」

こだわり

ふくらはぎをマッサージしながらエアータグとローラーの動きが多彩に変化するコースです。

くつろぎ

ふくらはぎをマッサージしながら一定のリズムを繰り返す、足裏のローラー中心の深いくつろぎを味わえるコースです。



✧ 脱着式カバーで清潔

足を入れる部分の外布カバーは取り外しができるため、洗濯をして清潔にお使いいただけます。


🕒 安心の自動オフ機能

電源がオンになってから、約10分経過すると自動的に運転が停止し、電源がオフになります。また、過度な負荷がかった場合や機械の異常な発熱を防ぐ安全装置も搭載しています。


お好みに合わせマッサージ位置を調整



- ・弱い刺激: 膝をやや前に
- ・標準的: もみ部の中央部に合わせる
- ・強い刺激: 膝を後ろに下げる

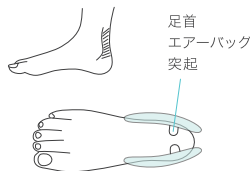

くるぶしのかかと側のくぼみ(斜線部)に足首エアータグの突起があたるようにすると、かかとにしっかりとエアータグの圧が伝わり、マッサージできます。

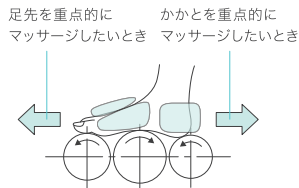

土踏まずを中央の突起に合わせると足裏全体をマッサージします。足を前後に移動すると、足先とかかとを重点的にマッサージできます。

フットマッサージャー SP25 FM220

販売名	フットマッサージャー SP25 FM220
ブランド・品番	SYNCA・FM220
JANコード	4951704135153
メーカー希望小売価格	オープン価格
医療機器認証番号	307AGBZX00049000
一般的名称・クラス分類	家庭用電気マッサージ器・管理医療機器
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用 一般家庭で使用する
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	最大65W
定格時間	30分(オートタイマー:10分)
質量	約14.5kg
寸法	約W480 x D520 x H495mm



電気代の目安: 約30円/月
(マッサージを1日約30分、毎日使用した場合)

※電力料金目安単価: 31円/kWh(税込)で算出。(当社調べ)

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈[りゅう(瘤)、急性静脈[りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)

■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腿鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口の
ご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様のご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

FAX番号

06-4793-0818

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ! [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目2-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年11月現在のものです。 25.11.2M.JP.BD.A [注文No.1813]